

漏れが不安？

ユニークなSIS基剤の皮膚保護剤とフラワーシェイプが、
優れた伸縮性と追従性を発揮。
カラダにぴったりフィットし漏れを防ぎます。
長年の実績に裏付けられたフレキシマアクティブで
漏れのない安心感をあなたに。

フレキシマ アクティブ

製品特長

伸縮性と追従性を高めた皮膚保護剤「B.Braun Tech」

- **優れた伸縮性** 柔らかく伸縮する皮膚保護剤が様々な動きに追従します。
- **フラワーシェイプ** 5つの花びら状の皮膚保護剤が腹部の曲面にフィットします。
- **高い初期粘着力** 初期の粘着力が高く、貼付直後の漏れを防止します。



伸縮する
5つの花びら状の
皮膚保護剤が
曲面にフィット。
貼付直後の漏れを
防止し、様々な
動きに追従。

SIS基剤が伸縮性のヒケツ

皮膚保護剤の主成分

疎水性ポリマー	SIS (スチレン・イソプレン・スチレン)
親水性ポリマー	カルボキシメチルセルロース ペクチン(柑橘植物由来) ゼラチン(豚由来)

支持体にも伸縮性




支持体も伸び縮みします。
細かな凹凸をほどこし、
様々な動きにフィットします。



幅広い排出口で容易な排出処理

ロールアップ排出口の特長

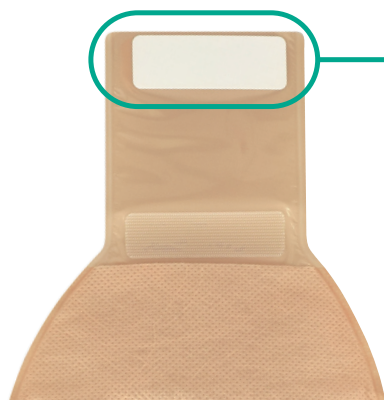


排出口の2枚のプラスチックプレートを左右にずらしているため、排出口を開けやすくしています。



プラスチックプレートを左右に押すと、軽い力で排出口が開くので、操作性が優れています。

漏れ・目詰まりを防ぐ HPフィルター

液体遮断性の高いメンブレン膜を採用したコンパクトなガス抜きフィルター。

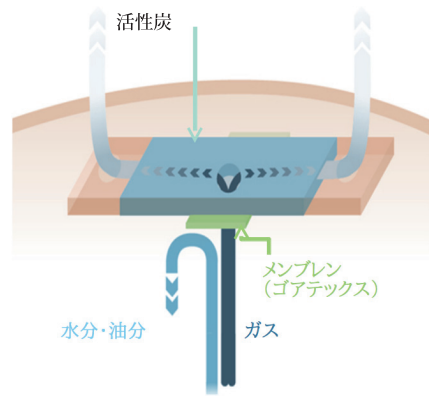

追従性 実証

フラワーシェイプで辺縁部までしっかり追従

73歳女性

ストーマ傍ヘルニアの患者にて使用、薄いフラワーシェイプの保護剤が辺縁部まで追従




高い伸縮性でしわや凹凸をトレース

84歳女性

薄くてしわにしっかり沿った装着が可能なフレキシマ アクティブを選択



フレキシマ アクティブ ロールアップ

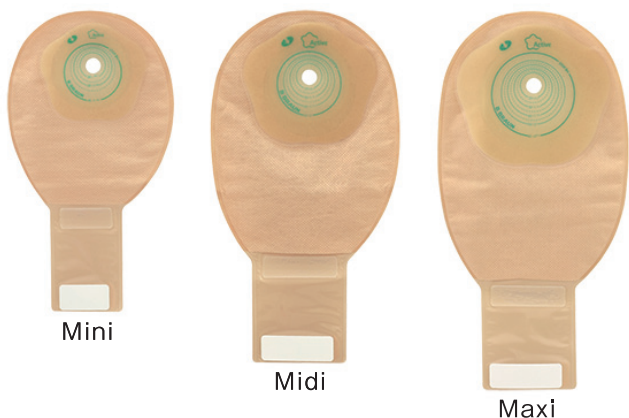

非課税

品番	色	有効径(mm)	サイズ(mm)	入数	標準価格
4621215G	透明	フリー (45まで)	Mini 242×136	10	¥5,900 (¥590/枚)
4620215G	肌色				
4621115G	透明	フリー (50まで)	Midi 283×154		
4621125G		プレカット (25)			
4621130G		プレカット (30)			
4621135G		プレカット (35)			
4621140G		プレカット (40)			
4620115G		肌色			
4620125G	プレカット (25)				
4620130G	プレカット (30)				
4620135G	プレカット (35)				
4620140G	プレカット (40)				
4621380G	透明		フリー (65まで)	Maxi 304×156	
4620380G	肌色				

製造販売元

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社



本社: 〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16
 カスタマーサービスセンター:
 0120-401-741 (フリーダイヤル)
 コーポレートサイト: www.bbraun.jp