

# Aesculap® Detachable Rongeurs

Simply clean

デタッチャブルロンジュール



Neurosurgery

# Aesculap® Detachable Rongeurs

## デタッチャブルロンジュール

### Simply clean

手術器械管理においては、専門的で効率的な再処理工程(洗浄/滅菌)が求められています。現代の厳しい衛生基準に適合した、合理的なソリューションとして、新しいデタッチャブル(分解式)ロンジュールをお届けします。

### NOIR coating

術中の乱反射を防ぎます。



### Easy identification

- 有効長
- ショー幅

- 1 上下シャフトの矢印(赤枠)を合わせ、金ボタンを押す
- 2 フロントハンドルを押し下げる
- 3 上部シャフトを持ち上げる




### The choice is yours

全86品番からお好みのタイプを選択できます。また全てがNoirコーティング(黒色チタンコーティング)で、術中の無影灯及び顕微鏡下での乱反射を防止します。

### Intuitive handling

ハンドル部分のGolden Button(金ボタン、上記図の①部分)を押すことで容易な分解が可能です。見た目だけでなく、操作性も直観的で簡単・迅速な組立と分解を可能にしています。洗浄時に上部シャフトが開き、容易にシャフト内部が洗浄できます。分解後もシャフト先端部は本体部分に接続されたままですので、パーツの紛失を防ぎ、洗浄後の再組立作業も簡単です。

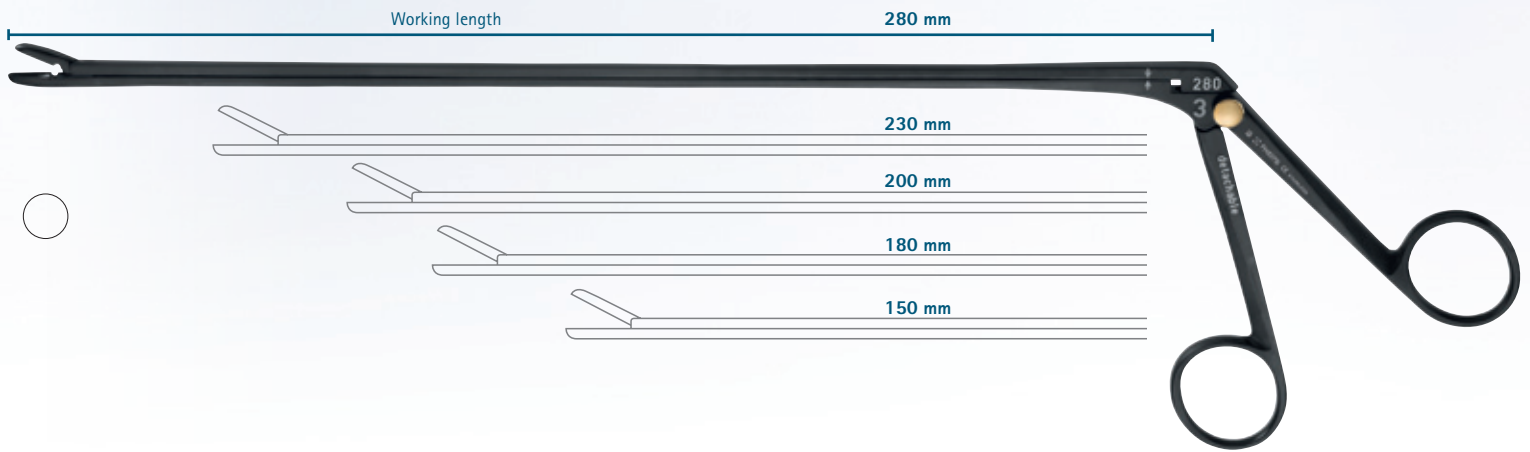

### スムーズジョータイプ




有効長	ジョータイプ	1.5 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
150 mm		FH801B	FH802B	FH803B	FH804B	FH805B
150 mm		FH901B	FH902B	FH903B	FH904B	FH905B
180 mm		FH811B	FH812B	FH813B	FH814B	FH815B
180 mm		FH911B	FH912B	FH913B	FH914B	FH915B
200 mm		FH821B	FH822B	FH823B	FH824B	FH825B
200 mm		FH921B	FH922B	FH923B	FH924B	FH925B
230 mm		FH891B	FH892B	FH893B	FH894B	FH895B
230 mm		FH931B	FH932B	FH933B	FH934B	FH935B
280 mm		-	-	FH837B	FH838B	FH839B

### 半鋸刃ジョータイプ



有効長	ジョータイプ	1.5 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
150 mm		FH851B	FH852B	FH853B	FH854B	FH855B
150 mm		FH951B	FH952B	FH953B	FH954B	FH955B
180 mm		FH861B	FH862B	FH863B	FH864B	FH865B
180 mm		FH961B	FH962B	FH963B	FH964B	FH965B
200 mm		FH871B	FH872B	FH873B	FH874B	FH875B
200 mm		FH971B	FH972B	FH973B	FH974B	FH975B
230 mm		FH881B	FH882B	FH883B	FH884B	FH885B
230 mm		FH981B	FH982B	FH983B	FH984B	FH985B
280 mm		-	-	FH847B	FH848B	FH849B

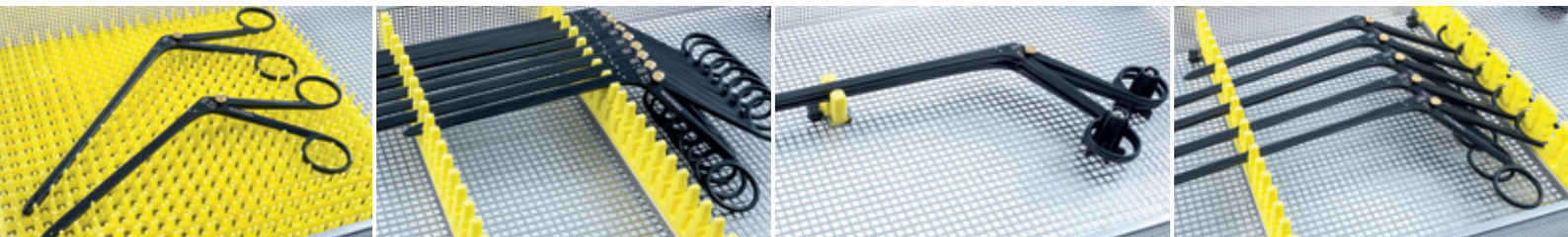

## Aesculap Instrument Organization System

手術器械は医療機関にとって重要な資産です。術中はもちろんのこと、滅菌工程やオペ室への搬入時、保管時でも大切に扱われるべきです。

特に繊細な手術器械や小さな器具に至るまでAesculap Organization Systemにより大切に管理することができます。

\*詳細は担当営業にお問い合わせください。



販売名：CNSロンジュール  
届出番号：13B1X00218139030

### 製造販売元 **ビー・ブラウンエースクラップ株式会社**

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16	☎ 03 (3814) 3886 FAX.03 (3814) 3734
カスタマーサービスセンター：	☎ 0120-401-741 (フリーダイヤル)
札幌営業所：〒060-0807 札幌市北区北7条西1-2-6 NSS・ニューステージ札幌	☎ 011 (726) 3537 FAX.011 (726) 8477
仙台営業所：〒980-0822 仙台市青葉区立町2-7-21 仙台橋本ビルディング	☎ 022 (224) 0780 FAX.022 (224) 0782
東京営業所：〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16	☎ 03 (3814) 3886 FAX.03 (3814) 3734
名古屋営業所：〒460-0003 名古屋市中区錦2-12-14 MANHYO第一ビル	☎ 052 (232) 7371 FAX.052 (232) 7372
大阪営業所：〒541-0044 大阪市中央区伏見町4-4-9 オーエックス淀屋橋ビル	☎ 06 (6223) 0770 FAX.06 (6223) 0773
福岡営業所：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-19-24 大博センタービル	☎ 092 (431) 6680 FAX.092 (431) 6681