

Aesculap[®] EC/IC Bypass Set

EC/IC バイパスセット




Aesculap Neurosurgery

Aesculap® EC/IC Bypass Set



- ラウンド型 ゴルフボールハンドル
 - スムーズなローテーションとホールド性
- 臨床に適した先端形状
 - ファインな先端形状で、繊細な作業をサポート
- 3種類の有効長（ショート、ミディアム、ロング）
 - 様々な術野へのバリエーション
- Noir®, No Irritating Reflections
 - 術中の乱反射を防ぐブラックコーティング
 - 耐腐食性向上
- ダイヤダストジョー付マイクロ手術器械
 - 縫合糸や組織の確実な把持
- リューザブル血管パンチ
 - 優れた品質と経済性
- マイクロ器械専用収納ケース
 - 洗浄・滅菌・管理面の向上



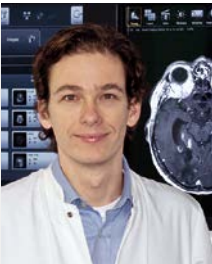


Peter Vajkoczy, MD
Berlin, Germany

脳底槽やシルビウス裂など異なる深さにおけるバイパス手術への挑戦は、外科医のパフォーマンスだけでなく、インスツルメントの環境においても同様です。エースクラップ社のバイパスセットがこの挑戦に効果的に勝利したことは評価されるべきです。このセットは明快なコンセプトとデリケートなデザインに加え高い耐久性を持っています。そのためこれらのインスツルメントは手術室での繰り返しの使用や再処理工程によるストレスに耐えることができます。加えてハンドルのデザインは正確な操作性を可能にしており、本セットの使用により日常が喜びに満ちたものになります。



Thomas A. Kopitnik, MD
Casper, USA

このインスツルメントの感触、バランス、精度は驚異的です。長さ、構造、コーティングに対し、多くの検討と配慮がなされたことは明らかです。このセットは外科医に対し、脳表から深部までの微小血管手術への解決方法を提供してくれます。このバイパスセットは繊細な血行再建や血管吻合用器具セットに入れるべきです。

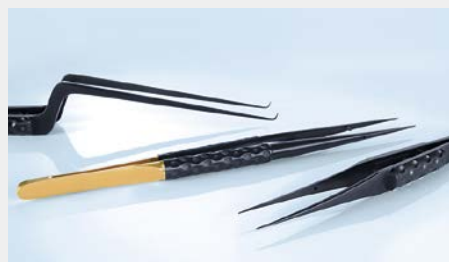

Aesculap® EC/IC Bypass Set

Short micro instruments








ダイヤモンド手術機器のジョーの表面にはダイヤモンドが薄く塗られています。このダイヤモンドコーティングは強い把持力と適度な弾力性がありますので、繊細な針・糸、組織等を把持するのに最適です。

Noir® マイクロ剪刀

Noir® マイクロピンセット

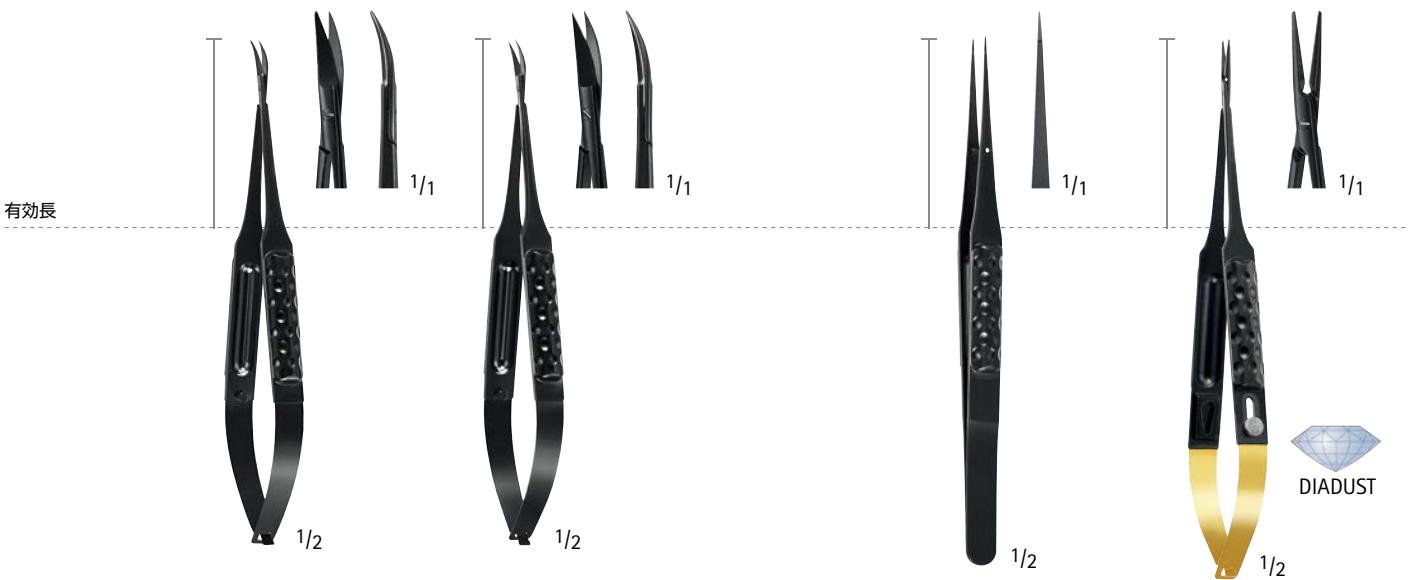Noir® マイクロ持針器

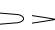

鋭／鋭		FD481B	FD482B	0.3 mm 	FD488B	FD493B
鈍／鋭				0.5 mm 		
有効長		50 mm	50 mm	有効長	50 mm	50 mm
全長		140 mm	140 mm	全長	140 mm	150 mm

ラチェット付
(スライド式)
適用サイズ：USP 6/0 以下



Noir® ダイヤモンドナイフ
ウェッジブレード

Noir® AVM
マイクロクリップ鉗子



FD115D

FE995K

有効長

80 mm

50 mm

全長

205 mm

180 mm

AVM マイクロクリップ 直 閉鎖圧 50 - 70g **【未滅菌】**

ブレード長	最大開き幅	1 個入り	4 個入り	
2 mm	1.5 mm	FE902K	FE922K	
3 mm	1.7 mm	FE903K	FE923K	
4 mm	2.0 mm	FE904K	FE924K	
5 mm	2.3 mm	FE905K	FE925K	

AVM マイクロクリップ 曲 閉鎖圧 50 - 70g **【未滅菌】**

ブレード長	最大開き幅	1 個入り	4 個入り	
2 mm	1.5 mm	FE912K	FE932K	
3 mm	1.7 mm	FE913K	FE933K	
4 mm	2.0 mm	FE914K	FE934K	
5 mm	2.3 mm	FE915K	FE935K	

Aesculap® EC/IC Bypass Set

Medium micro instruments



Noir® マイクロ剪刀


Noir® マイクロピンセット

Noir® マイクロ持針器



有効長

片側鋸刃状



鋭/鋭	
有効長	80 mm
全長	170 mm

FD483B
80 mm
170 mm



DIADUST

1/2

0.3 mm 	FD489B
0.5 mm 	
有効長	80 mm
全長	170 mm



DIADUST

1/2

ラチェット付
適用サイズ：USP 6/0 以下

FD494B
80 mm
170 mm



Noir® 血管パンチ



Noir タイプ

サイズ	品番
φ 4.0 mm	FB194B

シルバータイプ

サイズ	品番
φ 3.0 mm	FB201R
φ 3.5 mm	FB202R
φ 4.0 mm	FB194R
φ 4.5 mm	FB203R
φ 5.0 mm	FB195R
φ 5.5 mm	FB204R
φ 6.0 mm	FB196R

	FB194B
有効長	50 mm
全長	140 mm

※シルバータイプで他サイズもご用意しております

Noir® ダイヤモンドナイフ
ウェッジブレード 45°



	FD115D
	80 mm
	205 mm


Aesculap® EC/IC Bypass Set

Long micro instruments



ダイヤモンド手術機器のジョーの表面にはダイヤモンドが薄く塗られています。このダイヤモンドコーティングは強い把持力と適度な弾力性がありますので、繊細な針・糸、組織等を把持するのに最適です。

Noir® マイクロ剪刀

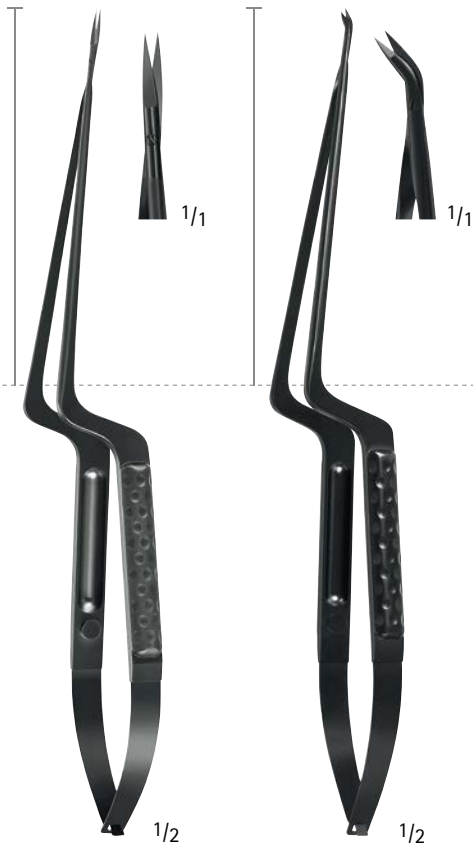

有効長

Noir® マイクロピンセット



Noir® マイクロ持針器



ラチェット付
適用サイズ: USP 6/0 以下

鋭/鋭	≧	FD484B
鈍/鋭	≧	FD485B
有効長		100 mm, 0°
全長		225 mm

		FD485B
有効長		100 mm, 45°
全長		225 mm

0.3 mm	≧	FD490B
0.5 mm	≧	
有効長		100 mm
全長		210 mm

		FD495B
有効長		100 mm
全長		210 mm



Noir® 血管パンチ



Noir タイプ

サイズ	品番
φ 4.0 mm	FB194B

シルバータイプ

サイズ	品番
φ 3.0 mm	FB210R
φ 3.5 mm	FB202R
φ 4.0 mm	FB194R
φ 4.5 mm	FB203R
φ 5.0 mm	FB195R
φ 5.5 mm	FB204R
φ 6.0 mm	FB196R

Noir® ダイヤモンドナイフ
ウェッジブレード 45°



	FB194B
有効長	50 mm
全長	140 mm

	FD115D
	80 mm
	205 mm

	FD460R
	410 x 257 x 56 mm

※シルバータイプで
他サイズもご用意しております

Aesculap[®] EC/IC Bypass Set



Recommended set list by Peter Vajkoczy, MD:

品番	品名	数量
FD481B	マイクロ剪刀、ノアール、反、鈍/鋭、有効長50mm、全長140mm	1
FD482B	マイクロ剪刀、ノアール、反、鋭/鈍、有効長50mm、全長140mm	1
FD483B	マイクロ剪刀、ノアール、反、鋭/鈍、有効長80mm、全長170mm	1
FD484B	マイクロ剪刀、ノアール、バイオネット型、直、鋭/鈍、有効長100mm、全長225mm	1
FD485B	マイクロ剪刀、ノアール、バイオネット型、反45°、鈍/鋭、有効長100mm、全長225mm	1
FD488B	マイクロピンセット、ノアール、直、先端φ0.3mm、有効長50mm、全長140mm	2
FD489B	マイクロピンセット、ノアール、直、先端φ0.3mm、有効長80mm、全長170mm	2
FD490B	マイクロピンセット、ノアール、直、先端φ0.3mm、有効長100mm、全長210mm	2
FD493B	マイクロ持針器、ノアール、直、先端φ0.5mm、有効長50mm、全長150mm	1
FD494B	マイクロ持針器、ノアール、曲、先端φ0.5mm、有効長80mm、全長170mm	1
FD495B	マイクロ持針器、ノアール、曲、先端φ0.5mm、有効長100mm、全長210mm	1
FD115D	ダイヤモンドナイフ、ウェッジブレード、先端45°、全長205mm	1
FB194B	血管パンチ、ノアール、φ4mm、有効長50mm、全長140mm	1
FE995K	AVM マイクロクリップ 鉗子 有効長50mm	1
FD460R	ワイヤーバスケット、バイバスセット用	1

品番	品名	数量
FE902K	[未滅菌] AVMマイクロクリップ 直 2mm (1個入)	1
FE903K	[未滅菌] AVMマイクロクリップ 直 3mm (1個入)	1
FE904K	[未滅菌] AVMマイクロクリップ 直 4mm (1個入)	1
FE905K	[未滅菌] AVMマイクロクリップ 直 5mm (1個入)	1
FE912K	[未滅菌] AVMマイクロクリップ 曲 2mm (1個入)	1
FE913K	[未滅菌] AVMマイクロクリップ 曲 3mm (1個入)	1
FE914K	[未滅菌] AVMマイクロクリップ 曲 4mm (1個入)	1
FE915K	[未滅菌] AVMマイクロクリップ 曲 5mm (1個入)	1
FE922K	[未滅菌] AVMマイクロクリップ 直 2mm (4個入)	1
FE923K	[未滅菌] AVMマイクロクリップ 直 3mm (4個入)	1
FE924K	[未滅菌] AVMマイクロクリップ 直 4mm (4個入)	1
FE925K	[未滅菌] AVMマイクロクリップ 直 5mm (4個入)	1
FE932K	[未滅菌] AVMマイクロクリップ 曲 2mm (4個入)	1
FE933K	[未滅菌] AVMマイクロクリップ 曲 3mm (4個入)	1
FE934K	[未滅菌] AVMマイクロクリップ 曲 4mm (4個入)	1
FE935K	[未滅菌] AVMマイクロクリップ 曲 5mm (4個入)	1

Further instruments for vascular surgery

Noir® マイクロピンセット オーバーホルト
上向



MVD (Micro Vascular Decompression)
手術時、血管と神経間の微細除圧操作や
深部頭蓋内の繊細な操作に適しています。

	FD510B	FD511B
有効長	90 mm, 45°	90 mm, 90°
全長	210 mm	210 mm

AESFULAP[®] - a B. Braun brand

製造販売元 **ビー・ブラウンエースクラップ株式会社**

本 社: 〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16
カスタマーサービスセンター: ☎ 0120-401-741 (フリーダイヤル)

Homepage: www.bbraun.jp

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
本カタログ掲載の製品毎の薬事取得番号及び販売名は、製品付属の添付文書をご参照ください。