



IV Accessories

B.Braun IV Accessories


ビー・ブラウン IVアクセサリ

CARESITE®

ケアサイト

生食ロック又はヘパリンロック時の陽圧ロック手技が不要

ケアサイトは中心静脈栄養や末梢静脈輸液において、生食ロックやヘパリンロックを行う際、血液がカテーテル内へ逆流するリスクを低減する製品です。

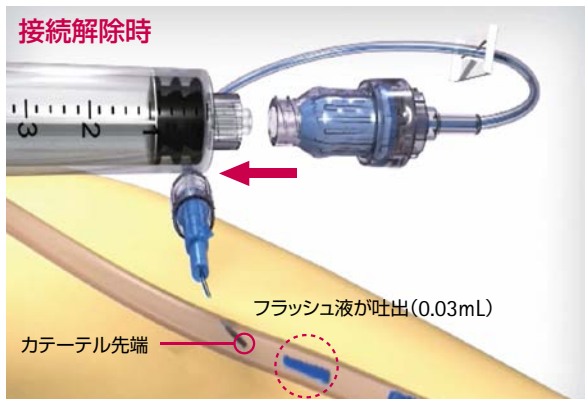

陽圧置換型ニードルレスバルブ


通常、血液のカテーテル内への逆流を防ぐ為、シリンジで生食又はヘパリン加生食を注入しながらシリンジを取り外し、カテーテル内を陽圧にする『陽圧ロック手技』が行われます。

ケアサイトは、シリンジ等を取り外した瞬間に、ニードルレスバルブ内が陽圧となり、フラッシュ液(生食/ヘパリン)が自動的に吐出(0.03mL)されるので、陽圧ロック手技の必要がありません。



フラットデザイン

消毒を容易に行うことが可能です。

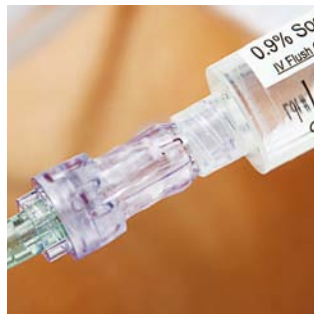

透明ハウジング

薬液の流れの確認ができます。



フィンガーグリップ

保持した際に滑りにくい形状です。



イーザーコネクション

軽い力で接続することができます。



バルブ(単体)



延長チューブ付(20cm)



Y型延長チューブ付



20cm延長チューブ・スタビライザー付

品番	製品名	製品仕様	内容量	耐圧性能	包装単位	販売単位
415122	ケアサイト	コネクタ単体	0.2mL	300psi	100個/箱	1箱
470100	ケアサイト 延長チューブ付	20cmチューブ付	0.5mL	300psi	100個/箱	1箱
470104	ケアサイト 延長チューブ付	36cmチューブ付	0.7mL	—	100個/箱	1箱
470106	ケアサイト Y型延長チューブ付	18cmY型チューブ付	0.9mL	—	50個/箱	1箱
470108	ケアサイト 延長チューブ付	15cmラージボアチューブ付	0.9mL	—	100個/箱	1箱
470185	ケアサイト 延長チューブ・スタビライザー付	20cmチューブ・スタビライザー付	0.6mL	300psi	100個/箱	1箱
470188	ケアサイト 延長チューブ・スタビライザー付	20cmラージボアチューブ・スタビライザー付	0.7mL	300psi	100個/箱	1箱

Safeflow / Discofix C Closed System

セーフフロー / ディスコフィックス C バルブ付

セーフフローは輸液療法において利便性を提供します

医療における質や安全性について高いレベルが求められる中、セーフフローは迅速かつ簡便に薬液投与を行うことができます。




PVCフリー

延長チューブはPVCフリーです。



セーフフローバルブ

専用デバイスや金属針を必要としません。

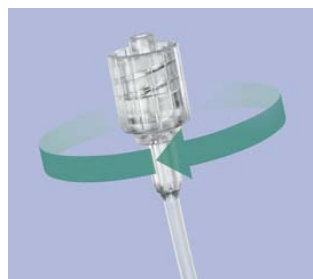

回転式ルアーロックコネクタ

接続の際にチューブがねじれるリスクを低減します。



一方弁付(4097148)

薬液等の逆流防止機構付です。

品番	製品名	規格・仕様	内容量	包装単位	販売単位
409100H	セーフフロー バルブ	バルブ(単体)	0.09mL	50個/箱	1箱
4097148N	セーフフロー 延長チューブ付	12cm Y型延長チューブ・一方弁付	0.92mL	100個/箱	1箱
4097154N	セーフフロー 延長チューブ付	10cm延長チューブ付	0.22mL	100個/箱	1箱

ディスコフィックス C バルブ付は薬品耐性の強い材質を使用しています




三方活栓

ディスコフィックス C とセーフフローの一体型です。



三方活栓 延長チューブ付

ディスコフィックス C バルブ付と延長チューブの一体型です。延長チューブはDEHPフリーです。

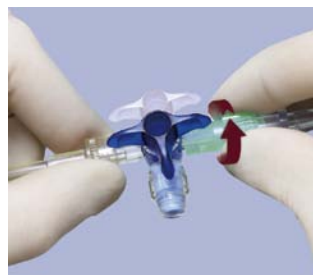

独立したオスルアー部

輸液ラインに接続後もラインを外すことなくコック位置を変更可能です。使用中にコックや本体に負荷が掛かることによる、接続の緩みや接続外れのリスクを低減します。



45度毎のクリック感

コック操作時、視覚と手の感覚による操作が可能です。

品番	製品名	規格・仕様	内容量	包装単位	販売単位
16494CSF	ディスコフィックス C バルブ付	バルブ付 青3バー・360°ルアーロック	0.29mL	100個/箱	2箱
16495CSF	ディスコフィックス C バルブ付	バルブ付 白3バー・360°ルアーロック	0.29mL	100個/箱	2箱
16500CSF	ディスコフィックス C バルブ・延長チューブ付	青3バー・360°ルアーロック バルブ・10cm延長チューブ付	0.84mL	50個/箱	4箱
16540CSF	ディスコフィックス C バルブ・延長チューブ付	青3バー・360°ルアーロック バルブ・50cm延長チューブ付	2.80mL	50個/箱	1箱
16551CSF	ディスコフィックス C バルブ・延長チューブ付	青3バー・360°ルアーロック バルブ・75cm延長チューブ付	4.03mL	50個/箱	1箱

Discofix C

ディスコフィックス C

耐薬品性三方活栓


ディスコフィックス Cは三方活栓本体の材質に耐薬品性に優れたナイロンを用いることで、薬品の影響によるクラックのリスクを低減することができます。



- 45度回転毎にクリック感があるので、確実なコック操作をサポートします。
- 色分けによる使用状況や使用薬剤の区別が可能です。
- 全ての接続口にキャップが付いているので、輸液ラインに接続するまでの接触感染リスクを低減します。

独立したオスルアー部

オスルアー部(ポリプロピレン製)と本体(ナイロン製)は別々のパーツとなっており、ディスコフィックス Cを輸液ラインに接続した後も接続を緩めることなく本体を回転させることができます。

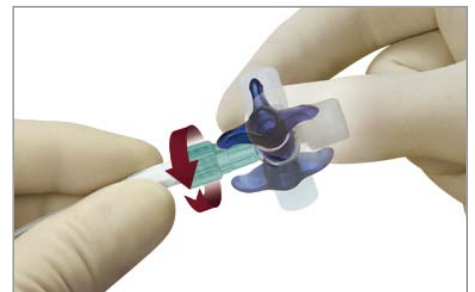

- 輸液ラインに接続後もラインを外すことなくコック位置を変更することが可能です。
- 使用中にコックや本体に負荷がかかることによる接続の緩みや接続外れのリスクを低減します。

ディスコフィックス C 延長チューブ付



ディスコフィックス C マニホールド



品番	製品名	規格・仕様	包装単位	販売単位
16494C	ディスコフィックス C	青 3バー 360°ルアーロック	100個/箱	2箱
16495C	ディスコフィックス C	白 3バー 360°ルアーロック	100個/箱	2箱
16496C	ディスコフィックス C	赤 3バー 360°ルアーロック	100個/箱	2箱
16497C	ディスコフィックス C	黄 3バー 360°ルアーロック	100個/箱	2箱
16500C	ディスコフィックス C 延長チューブ付	青 3バー 360°ルアーロック 10cmチューブ付	50個/箱	4箱
16520C	ディスコフィックス C 延長チューブ付	青 3バー 360°ルアーロック 25cmチューブ付	50個/箱	1箱
16540C	ディスコフィックス C 延長チューブ付	青 3バー 360°ルアーロック 50cmチューブ付	50個/箱	1箱
16551C	ディスコフィックス C 延長チューブ付	青 3バー 360°ルアーロック 75cmチューブ付	50個/箱	1箱
16560C	ディスコフィックス C 延長チューブ付	青 3バー 360°ルアーロック 100cmチューブ付	50個/箱	1箱
16501C	ディスコフィックス C 延長チューブ付	白 3バー 360°ルアーロック 10cmチューブ付	50個/箱	4箱
16801C	ディスコフィックス C マニホールド	2連(白/青)板無し3バー 360°ルアーロック	50個/箱	1箱
16901C	ディスコフィックス C マニホールド	3連(赤/緑/青)板無し3バー 360°ルアーロック	50個/箱	1箱
16600C	ディスコフィックス C マニホールド	3連(青/黄/赤)板付き3バー 360°ルアーロック	50個/箱	1箱
16605C	ディスコフィックス C マニホールド	3連(青/青/青)板付き3バー 360°ルアーロック	50個/箱	1箱
16608C	ディスコフィックス C マニホールド	5連(赤/緑/白/黄/青)板付き3バー 360°ルアーロック	40個/箱	1箱

Discofix

ディスコフィックス

スタンダードタイプ三方活栓

5色のカラーバリエーションがあり使用状況や使用薬剤の区別が可能です。
また、全ての接続口にキャップが付いているので接触感染リスクを低減します。



クロー징コーン ロックM



ディスコフィックス延長チューブ付



コンビキャップ



品番	製品名	規格・仕様	包装単位	販売単位
15809	ディスコフィックス	青 1バー-360°ルアーロック	50個/箱	4箱
15895	ディスコフィックス	青 3バー-360°ルアーロック	50個/箱	4箱
15896	ディスコフィックス	赤 3バー-360°ルアーロック	50個/箱	4箱
15897	ディスコフィックス	黄 3バー-360°ルアーロック	50個/箱	4箱
15898	ディスコフィックス	白 3バー-360°ルアーロック	50個/箱	4箱
15899	ディスコフィックス	緑 3バー-360°ルアーロック	50個/箱	4箱
4591496	ディスコフィックス	青 3バー-360°ルアースリップ	50個/箱	4箱
4597532	ディスコフィックス	青 1バー-360°ルアースリップ	50個/箱	4箱
4098501	ディスコフィックス 延長チューブ付	青 3バー-360°50cm延長チューブ付	50個/箱	1箱
4597982	クロージングコーン ロックD	メスルアー用保護栓 透明	100個/箱	10箱
4097076	クロージングコーン ロックM	メスルアー用保護栓 白	100個/箱	10箱
4495101	コンビキャップ	オスメス両用保護栓 赤	100個/箱	10箱
4495152	コンビキャップ	オスメス両用保護栓 青	100個/箱	10箱
4495209	コンビキャップ	オスメス両用保護栓 白	100個/箱	10箱

Back Check Valve / T-port extension set

逆流防止弁 / T型ポート付延長チューブ

逆流防止弁

輸液ラインに接続することにより流路が一方方向になります。
単一デバイスなので輸液ラインのどの位置にでも簡単に接続できます。



- 管腔内圧の上昇による輸液ルート内への逆流防止機構になります。
- 三方活栓、Y字管、混注口などの上流部に使用することで、側注から投与した薬液を確実に末梢ルートへ流すことができます。

品番	製品名	規格・仕様	包装単位	販売単位
7B3215	ロープレッシャー・バックチェックバルブ	弁開放圧: 1.9kPa (19cmH ₂ O)以上 耐圧性能: 206kPa	100個/箱	1箱
4094000N	バックチェックバルブ	弁開放圧: 2.0kPa (20cmH ₂ O)以上 耐圧性能: 200kPa	50個/箱	1箱

T型ポート付延長チューブ

末梢に近い位置でのボラス投与が可能になります。



ニードルインジェクションタイプ



シリンジインジェクションタイプ



品番	製品名	規格・仕様	内容量	包装単位	販売単位
471950	T型ポート付延長チューブ(ET-04T)	12.1cm延長チューブ付 ルアースリップ	0.25mL	100個/箱	1箱
471954	T型ポート付延長チューブ(ET-04TS)	12.1cm延長チューブ付 ルアーロック	0.25mL	100個/箱	1箱
471987	T型ポート付延長チューブ(SET-04TSL)	12.7cm延長チューブ付 ルアーロック	0.47mL	100個/箱	1箱

Intrafix[®] Safeset

イントラフィックス セーフセット

自然滴下用輸液セット

プライミングストップ機能とエアストップ機能が付いた安全性と利便性を追求した輸液セットです。



ニードルレスバルブ付



逆流防止弁付



プライミングストップ機能

イントラフィックス セーフセットのオスルアー部に装着されているキャップにはエアだけを通す特殊なフィルタが内蔵されています。

■ 特長

キャップに内蔵されているフィルタはエアしか通さないのので、チューブのエアが抜けると自動的に滴下が止まりプライミングが完了します。

エアストップ機能

イントラフィックス セーフセットのチャンバー部底面にはエアを通さない特殊なフィルタが内蔵されています。

■ 特長

輸液剤がなくなったことに気付かない場合でも、エアストップ機能によりチューブ内にエアは入りません。

品番	規格・仕様				包装単位	販売単位
4063000	自然滴下用	20 滴≒1mL	←180cm→	DEHPフリー	100個/箱	1箱
4063001	自然滴下用	20 滴≒1mL	←180cm→	DEHPフリー	逆流防止弁付	100個/箱 1箱
4063002	自然滴下用	20 滴≒1mL	←180cm→	PVCフリー	100個/箱	1箱
4063004	自然滴下用	20 滴≒1mL	←210cm→	DEHPフリー	ニードルレスバルブ付	100個/箱 1箱

製造販売元

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

カスタマーサービスセンター

TEL 0120-401-741 (フリーダイヤル)

<http://www.bbraun.jp/>

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
製品のご使用にあたっては、製品に付属の添付文書を必ずお読み下さい。

販売名	届出番号
ケアサイト	13B1X00218474023
セーフフロー	13B1X00218474021
ディスコフィックスC	13B1X00218451001
ディスコフィックス	13B1X00218451013
クロージングコーン	13B1X00218451003
コンビキャップ	13B1X00218451006
ロープレッシャー・バックチェックバルブ	13B1X00218474003
バックチェックバルブ	13B1X00218474016
T型ポート付延長チューブ	13B1X00218451018
イントラフィックス セーフセット	13B1X00218474013