

Aesculap[®] MIN Micro Instruments

MIN マイクロ器械セット

Instruments for Minimally Invasive Neurosurgery



Neurosurgery

Aesculap[®] MIN Set Features



Noirコーティング

窒化チタンで表面をコーティングし、表面硬度を高めるとともに顕微鏡下での乱反射を防止します。



スレンダーなシャフトの アングルバイオネット型ハンドル

シャフトをスレンダーにすることで術野の視野の妨げになりません。また、顕微鏡下での障害になりにくいアングルバイオネット型ハンドルを採用し、良好な視野を保ちます。また、ゴルフボールデザインのラウンドハンドルを採用し、的確な保持とスムーズなローテーションを可能にしました。

ファインな先端形状

繊細な組織や狭い術野において、ファインな先端形状は特に重要です。




様々なワーキングレンジス

一つのハンドルデザインに多彩な先端形状と有効長のラインナップを有し、様々な術野における選択を可能にしました。

Aesculap[®] MIN Instruments

Micro Scissors

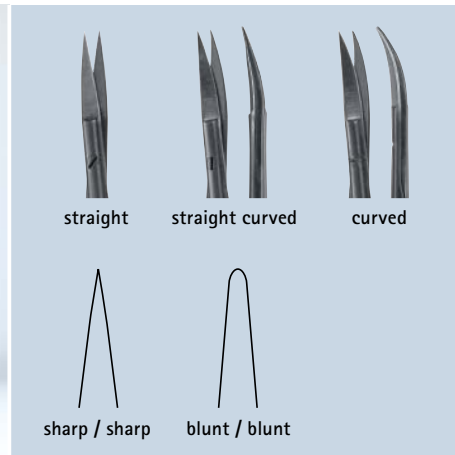





ブレードをギザ刃にすることで組織が滑ることを防ぎます。ストレート、弱弯、強弯の剪刀をラインナップしました。


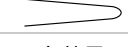


ブレード先端部は鋭タイプと鈍タイプをご用意し、鈍的/鋭的剥離の両方に対応できます。板バネ部分にブレード先端形状がマーキングされ、術中確認がしやすくなりました。



	straight	s.cvd	curved
	FD701B	FD702B	FD703B
	FD704B	FD705B	FD706B
有効長	70 mm	70 mm	70 mm
全長	200 mm	200 mm	200 mm

	straight	s.cvd	curved
	FD731B	FD732B	FD733B
	FD734B	FD735B	FD736B
有効長	90 mm	90 mm	90 mm
全長	220 mm	220 mm	220 mm

	straight	s.cvd	curved
	FD771B	FD772B	FD773B
	FD774B	FD775B	FD776B
有効長	120 mm	120 mm	120 mm
全長	250 mm	250 mm	250 mm

Aesculap[®] MIN Instruments

Micro Needle Holder



For suture material size
7/0 and smaller.


2/1



先端チップはカーブタイプを採用、チップ部分はスムーズジョーとなっており、USP 7/0以下のスーチャーに対応。



的確に針を把持するためにラチェットを装着

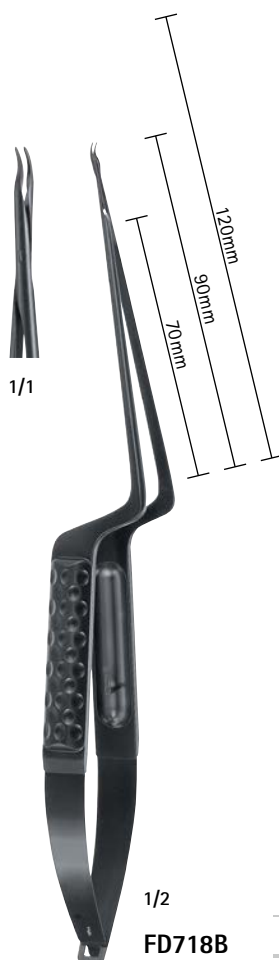

1/2

FD718B


有効長

全長

	FD717B	FD718B	FD719B
有効長	70 mm	90 mm	120 mm
全長	200 mm	220 mm	250 mm

Aesculap[®] MIN Instruments

Tissue and Tumor Grasping Forceps

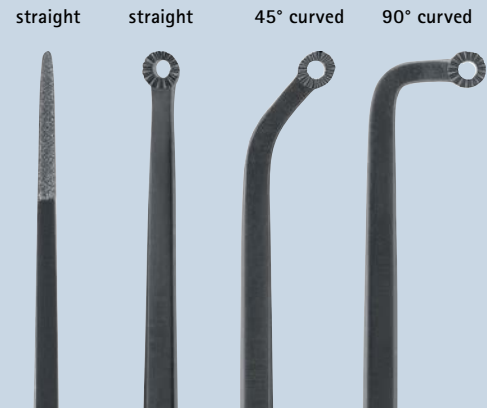

ピンセット先端内側部分をダイヤモンドコーティングしました。DIADUST[®]により組織をしっかりと把持します。



腫瘍ピンセットはギザ刃を用い、迅速かつ確かな腫瘍把持を実現します。



1/2
FD741B




1/2
FD787B

0.5 mm	⇐	FD711B	FD741B	FD761B
0.9 mm	⇐	FD713B	FD743B	FD763B
有効長		70 mm	90 mm	120 mm
全長		190 mm	210 mm	240 mm


	straight	45° curved		90° curved			
2.5 mm	⊙	FD766B	FD786B	FD767B	FD787B	FD768B	FD788B
3.5 mm	⊙	FD769B	FD789B	-	-	-	-
有効長		90 mm	120 mm	90 mm	120 mm	90 mm	120 mm
全長		210 mm	240 mm	210 mm	240 mm	210 mm	240 mm

Aesculap[®] MIN Instruments


Micro Instruments

		Modular handles / ハンドル	
	FD811B	Noir	ハンドル φ 8 mm, 100 mm
	FD812B	Noir	ハンドル φ 11 mm, 100 mm
	FD818B	Noir	ハンドル φ 8 mm, 100 mm 低バイオネット
	FD819B	Noir	ハンドル φ 11 mm, 100 mm 低バイオネット
	FD848B	Noir	ハンドル φ 8 mm, 100 mm 高バイオネット
	FD849B	Noir	ハンドル φ 11 mm, 100 mm 高バイオネット


1/2

		Hooks / フック	
	FD797B	Noir	フック 玉付 200 mm, 0°
	FD798B	Noir	フック 玉付 200 mm, 45°
	FD799B	Noir	フック 玉付 200 mm, 90°
	FD808B	Noir	フック 先端鈍 200 mm, 45°
	FD809B	Noir	フック 先端鈍 200 mm, 90°
	FD805B	Noir	フック 先端鋭 200 mm, 90°

2/1

		Scoops / 鋭匙	
	FD814B	Noir	鋭匙 200 mm, 2 mm, 10°
	FD815B	Noir	鋭匙 200 mm, 2 mm, 45°
	FD816B	Noir	鋭匙 ロングネック 200 mm, 2 mm, 45°

2/1

		Dissectors / 剥離子	
	FD821B	Noir	剥離子 先端曲 200 mm, 1 mm
	FD822B	Noir	剥離子 先端曲 200 mm, 2 mm
	FD823B	Noir	剥離子 先端曲 200 mm, 3 mm

2/1



Tray / 収納トレイ

FD467R 収納トレイ 243 × 253 × 56mm

Curettes / キュレット



FD824B Noir キュレット 200 mm, φ 4 mm, 0°

FD825B Noir キュレット 200 mm, φ 4 mm, 45°

FD826B Noir キュレット 200 mm, φ 4 mm, 90°

FD827B Noir キュレット ロングネック 200 mm, φ 4 mm, 45°

FD828B Noir キュレット ロングネック 200 mm, φ 4 mm, 90°

FD835B Noir キュレット 200 mm, φ 6.5 mm, 45°

FD836B Noir キュレット 200 mm, φ 6.5 mm, 90°

2/1

Rasparatories / ラスパトリューム



FD831B Noir ラスパトリューム 200 mm, 1 mm

FD832B Noir ラスパトリューム 200 mm, 2 mm

FD833B Noir ラスパトリューム 200 mm, 3 mm

2/1

Tumor knives / 腫瘍ナイフ



FD839B Noir 腫瘍ナイフ 200 mm, φ 1.5 mm, 45°

FD840B Noir 腫瘍ナイフ 200 mm, φ 3 mm, 45°

FD841B Noir 腫瘍ナイフ 200 mm, φ 4.5 mm, 45°

2/1

AESFULAP[®] - a B. Braun brand

製造販売元 **ビー・ブラウンエースクラップ株式会社**

本 社: 〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16
カスタマーサービスセンター: ☎ 0120-401-741 (フリーダイヤル)

Homepage: www.bbraun.jp

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
本カタログ掲載の製品毎の薬事取得番号及び販売名は、製品付属の添付文書をご参照ください。

販売名:	届出番号:
はさみ	13B1X00218135003
持針器	13B1X00218130003
ピンセット	13B1X00218136005
剥離子	13B1X00218142008
消息子	13B1X00218153001
メス	13B1X00218134002
C N S 鉤	13B1X00218138005