



Spine

# AESCULAP® S4 SRI


# S<sup>4</sup> SRI

## Spondylolisthesis Reduction Instrument


### S<sup>4</sup>すべり整復用Instrument

S<sup>4</sup> Spinal System専用開発したS<sup>4</sup> SRI(Spondylolisthesis Reduction Instrument)は、すべり椎の整復を目的としており、トランスレーション及びスリップアングルを同時に整復することが可能です。また、多椎間に及ぶことなく単椎間で操作できるように設計しました。

S<sup>4</sup> SRIはすべり椎の進行に沿った円運動による整復を行うことで、解剖学構造に対する障害や、既に伸張した神経根のOver-Distractionにより生じる障害を軽減します。さらにDistractionとReductionを同時に行えるため、手技ステップを短縮することにもつながります。また、実際の整復時には過度な力による操作は必要とせず、術中イメージを確認しながら細かくゆっくりと整復を行うことが可能です。

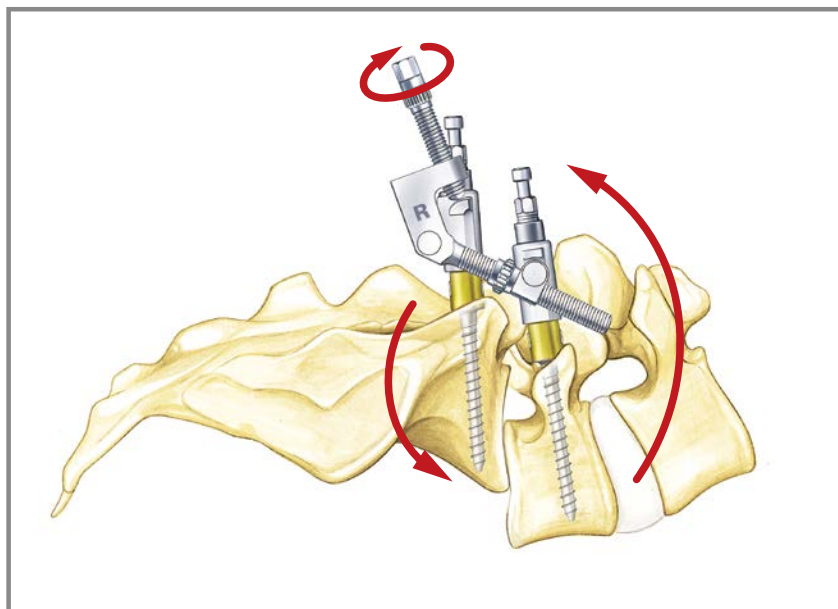


刺入したS<sup>4</sup> ペディクルスクリューにSRIを設置。X線イメージを確認しながらリダクションボルトをゆっくりと回転させ、すべり椎を円運動により整復する。

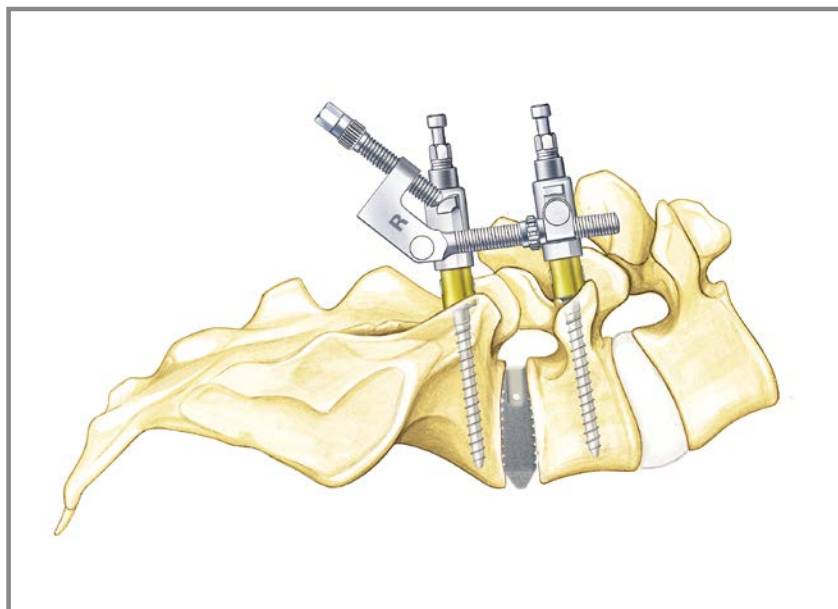

整復操作が完了し、椎体間インプラント(ProSpace XPなど)を挿入した状態。この後SRIを取り外す。

## Feature & Benefit

- S4専用のすべり整復システム
- 1椎間でのすべり整復が可能
- 円運動による整復操作
- Distraction & Reduction操作
- 術中イメージを使用
- 整復操作を細かくコントロールすることが可能
- 過度な整復を防止
- 整復後の微調整も可能

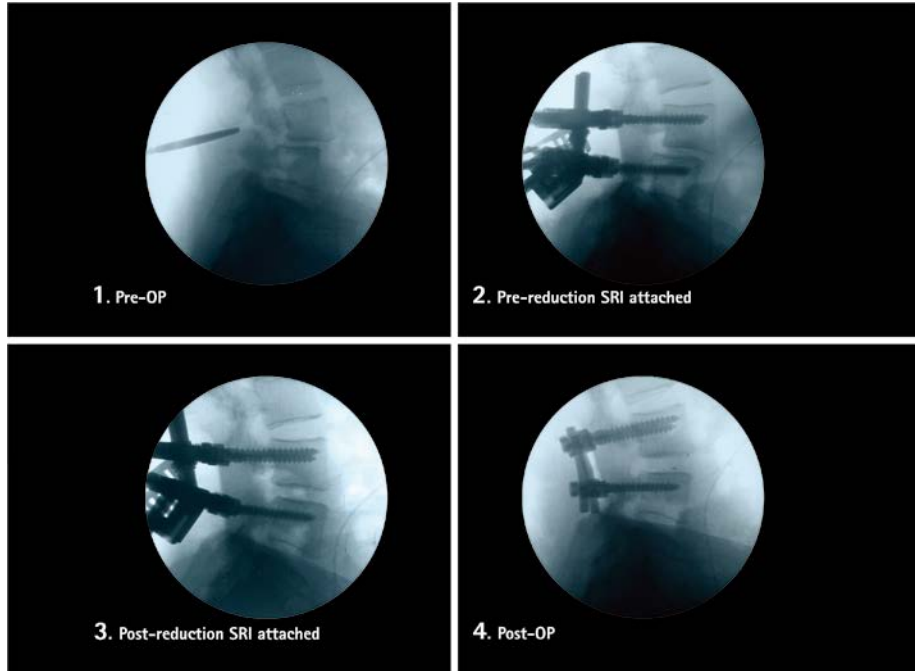

## Instrument

### Basic Instrument



FW225R  
リダクション アタッチメント



FW231R  
リダクション T型ソケット



FW232R  
リダクション T型キーハンドル



FG318R  
リダクション T型ソケット



FG319R  
リダクション T型キーハンドル

### Optional Instrument



リダクション レバー  
(FW225Rに2本付属)



FG321R  
リダクション スパナー



FG322R  
リダクション スピードスパナー



FW246R  
専用トレイ

## AESCULAP®-a B. Braun brand

販売名： S<sup>+</sup>スパイナルシステム用手術器械セット  
ソコン手術器械セット

届出番号： 13B1X00218258006  
13B1X00218258014

製造販売元 **ビー・ブラウンエースクラップ株式会社**

本 社: 〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16  
カスタマーサービスセンター: ☎ 0120-161-743(フリーダイヤル)

Homepage : [www.bbraun.jp](http://www.bbraun.jp)

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

